

*Spot an! Der Teeny –
macht kleine Leute ganz groß.*



Der leicht faltbare Kinderrollstuhl **Teeny** wächst mit. Und das **ohne Austauschteile**. Denn die teleskopierbaren Rahmen-Seitenteile ermöglichen die Verstellung der Rahmenlänge. Auch die **Sitztiefe** und **Rückenhöhe** sind auf die wachsenden Anforderungen einfach einstellbar. Der **Teeny plus** erlaubt durch die patentierte **ausziehbare Kreuzstrebe** ein zusätzliches **Mitwachsen der Sitzbreite**.

























Dadurch wird der Teeny zu einem langjährigen und zuverlässigen Begleiter. Für ein aktives Erleben.

Vielfältiges Zubehör und zahlreiche Ausstattungsvarianten ergänzen das Konzept der kindgerechten und individuellen Anpassung.

**Teeny –
Wachstum inbegriffen.**



Rahmenfarben:

	RAL 1023 verkehrsgelb		graumatt
	RAL 3001 signalrot		RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 3004 purpurrot		goldglitter
	Violett- metallic		silberglitter
	RAL 6026 opalgrün		sparkle lemon
	Grün- metallic		sparkle hellorange
	RAL 5010 enzianblau		sparkle rot
	RAL 5013 kobaltblau		sparkle blau
	jeans- metallic		sparkle blaugrün
	saturnblau- metallic		sparkle Granny Smith
	enchanteblau		matt violett
	anthrazit- metallic		
	brilliant-silber		

Druckbedingte Farb-
abweichungen vom
Original-Farbtönen möglich!



Teeny im Detail

Der Teeny wurde für den kindgerechten Alltag konzipiert: Er ist sicher, leicht und schmal faltbar. Der im Fußbereich verbreiterte Rahmen schafft mehr Platz für die Positionierung der Füße. Der abgewinkelte Kippenschutz erleichtert das Schieben durch die Begleitperson.

Vielfältiges Zubehör, zahlreiche Ausstattungsvarianten und Kombinationsmöglichkeiten für die individuelle Anpassung runden das Konzept ab.

Teeny –
alles für einen kindgerechten Alltag.



Sitzbreiten von 23 – 33,5 cm mit nur einer teleskopierbaren Kreuzstrebe



Sitztiefen von 24 – 36,5 cm durch teleskopierbaren Seitenrahmen und Sitzrohre



Verbreitertes Rahmenvorderteil

Technische Features:

- Gewicht: ab 11 kg
- Sitzbreite: 23 / 26 / 28,5 / 31 / 33,5 cm
- Mitwachsende Sitztiefe: 24 - 36,5 in 2,5 cm Schritten
- Rückenhöhe: 25 - 35 in 2 cm Schritten
- Sitzhöhe vorne: 37,5 - 49 cm
- Sitzhöhe hinten: 34,5 - 47 cm
- Unterschenkellänge: 15 - 43 cm
- Gesamtlänge: 68 - 100 cm
- faltmaß: ab 33 cm
- faltbarer Leichtmetallrahmen
- 8-fach verstellbare Antriebsradposition
- weitere Rahmen- und Bespannungsfarben


Technische Änderungen vorbehalten

Bespannungsfarben:



Speichenschutz:

Motiv „Tiger“
(in zwei
Farbvarianten)

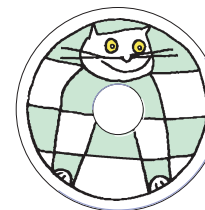

Motiv „Katze“

Motiv
„Männchen“

