

Otto Bock®

CALIDAD DE VIDA



Lisa es movilidad.

Los padres quieren desplazarse con su hijo de forma sencilla y sin complicaciones. Lisa es un buggy plegable y compacto con gran estabilidad y que permite cargas hasta 60 kg. Por su reducida medida de plegado su transporte es especialmente fácil. Ruedas de alta calidad con buenas características de rodamiento que proporcionan alta movilidad y buen confort al empujar. La Lisa permite el uso durante un periodo prolongado, por la profundidad del asiento, la longitud de la pantorrilla ajustables y el respaldo alto. Los diversos accesorios facilitan adicionalmente el ajuste individual a diferentes cuadros clínicos y rendimientos. El tapizado reforzado de nilón proporciona un buen posicionamiento del tronco. Por el ajuste del ángulo del respaldo de 30° es posible realizar una posición de descanso.

Lisa no sólo es atractiva, sino que también se ha pensado en los detalles: El freno de bloqueo con funcionamiento central, la ayuda de inclinación o las correas integradas para el transporte en vehículos adaptados – todo para que los padres se puedan desplazar con su hijo de forma sencilla y sin complicaciones



Otto Bock Ibérica S.A.

c/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos · Tel. 91 806 30 00 · Fax 91 806 04 15 · ottobock@spain.ottobock.de · www.ottobock.es




Lisa

Datos técnicos


	3 a 8 años	6 a 16 años
Profundidad asiento	30/35	35/40
Ancho asiento (sin/con acolchado)	36/32	41/37
Altura respaldo	65	70
Inclinación	90°-120°	90°-120°
Longitud pantorrilla	27-40	27-40
Peso (Equipamiento básico)	13,5 kg	14 kg
Capacidad carga	50 kg	60 kg
Medida plegado (LxAxa)	103x45x43	103x45x43
Rueda Ø delante/atrás	18/25	18/25

Lisa en el detalle


- Buggy compacto y plegable de aluminio con estabilidad especialmente alta
- Dos tamaños, ruedas delanteras guiables
- Tapizado reforzado de nilón
- Acolchado con colocación fija para accesorios (opcional)
- Regulación ángulo respaldo hasta 30°
- Ayuda de inclinación integrada
- Ruedas de alta calidad con buenas características de rodamiento
- Medida reducida del plegado
- Accesorios para el posicionamiento

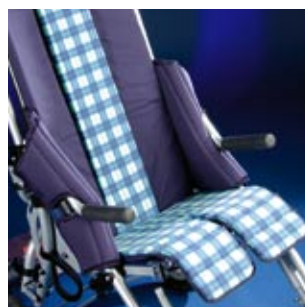

Acolchado, Reposabrazos

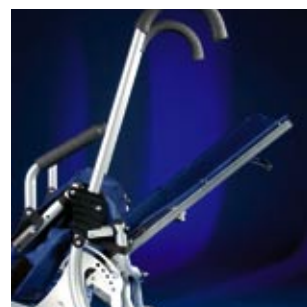

Regulación ángulo respaldo

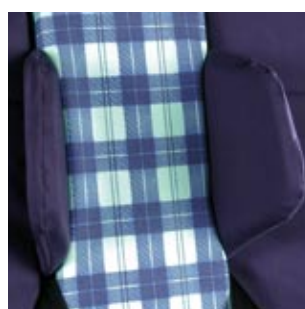

Reposacabezas



Techo



Cuña de abducción



Plataforma con ruedas adaptables al Buggy



Freno



Ayuda de inclinación integrada

OAO Bock®

CALIDAD DE VIDA