


# Raum-Desinfektionsgerät

Wirksamer Schutz vor Keimen auf Knopfdruck –  
schnell und einfach



Quality for life

1

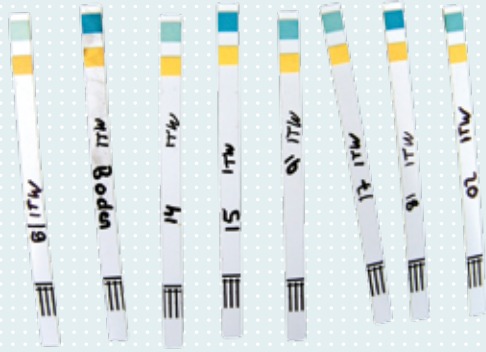

2



3



- 1 Teststäbchen (Art.-Nr. 640Z41) – als Vernebelungsnachweis und zur Prüfung der Desinfektionsresultate
- 2 Raum-Desinfektionsmittel (Art.-Nr. 640Z40) – umweltfreundliches und rückstandsfreies Biozid
- 3 Raum-Desinfektionsgerät (Art.-Nr. 758E1)

# Ihr neuer Hygienestandard: auf dem Niveau einer Arztpraxis

Mit dem automatischen Raum-Desinfektionsgerät eliminieren Sie Krankheitserreger in Ihrem Sanitätshaus – und damit ein Gesundheitsrisiko für Ihre Kunden und Ihr Team.

Trotz gründlicher Scheuer-/ Wischdesinfektion weisen 42 % der Flächen in medizinischen Bereichen eine sehr hohe Keim-Belastung auf.\*

Dieses Gesundheitsrisiko, das für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden besteht, können Sie auf Knopfdruck effizient beseitigen: Das mobile Raum-Desinfektionsgerät erzeugt einen feinen Desinfektionsnebel, der auch in unzugängliche Bereiche gelangt. Die Desinfektion erfolgt automatisch gemäß der von Ihnen vorgenommenen Einstellung – schnell, wirtschaftlich und sicher, ohne Spuren oder toxische Rückstände zu hinterlassen.

## Eigenschaften und Vorteile Raum-Desinfektionsgerät Art.-Nr. 758E1:

- Mobilität des Systems ermöglicht die benutzerfreundliche Desinfektion aller Räumlichkeiten
- Breitband-Wasserstoffperoxid-Desinfektionsmittel wirkt gegen Bakterien, Pilze, Sporen und Viren inkl. Noroviren
- Reinigung durch Desinfektionsnebel, auch in unzugänglichen Bereichen
- Silberionen verhindern das Wachstum neuer Bakterien und bieten Langzeitschutz
- Umweltfreundliches und rückstandsfreies Biozid
- Hohe Wirtschaftlichkeit bei höchstem Hygieneniveau und geringstmöglichem Personalaufwand

## Technische Daten Desinfektionsgenerator

Grunddaten	
Max. desinfizierbares Raumvolumen	270 m <sup>3</sup>
Durchschn. Verbrauch der Desinfektionsflüssigkeit	2 ml / m <sup>3</sup>
Volumen Vorratsbehälter	5 l
Trockener Druckluftkompressor, ohne Öl	1,6 m <sup>3</sup> / h
Geräuschpegel	62 dB
Elektrischer Anschluss	
Frequenz	50 / 60 Hz
Verbrauch	350 W
Spannung	230 V
Gewicht	20 kg
Maße	
Höhe	800 mm
Breite	390 mm
Tiefe	300 mm

## Zusätzliche Informationen zum Desinfektionsmittel

### Technische Daten

Breitband-Wasserstoffperoxid- Desinfektionsmittel mit Silberkomplex	
Kanistervolumen	5 l
Physikalischer Zustand	Flüssig
Geruch	Charakteristisch
pH-Wert bei 20 °C	2 – 5
Farbe	Farblos
Haltbarkeit	2 Jahre
Wirkungsspektrum	Bakterien, Pilze, Sporen, Viren inkl. Noroviren
Biologisch abbaubar	99,99 %



\*Quelle: Hygieneinstitut Bionovis am Beispiel von Zahnarztpraxen

**Mit freundlicher Empfehlung**



Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH  
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt/Germany  
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414  
prothetik@ottobock.de · www.ottobock.de